
הוראות שימוש לאקדח
עיסוי דגם

PHOENIX

מבית אנרג'ים ספורט

מומלץ להיוועץ ברופא לפני השימוש


דגם ספק הכח – HY-2606



מבט על



מבט מאחור

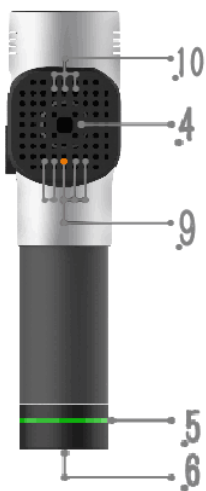

מבט מהצד



1. מנוע שקט ועמיד בפועל במהירות גבוהה
2. לחצן הוצאת סוללה
3. סוללה (מתח: 24 וולט, 2500 מיליאמפר)
4. לחצן הפעלת מנוע וכיוון מהירות
5. ציין סוללה
6. מתג סוללה+
7. חיבור טעינה
8. תשע צורות של ראש עיסוי
9. ציין עוצמת סוללה. ארבעה פסי אור ירוק ואחד אדום דולקים מציינים שהסוללה עם עוצמה מספיקה. בזמן השימוש, האורות יחלו להיכבות משמאל לימין, עד שרק האור האדום יישאר כדי להראות שיש לטעון את הסוללה.
10. ציין מהירות. מימין לשמאל, האור הכחול הראשון נדלק לציון הילוך ראשון, מהירות פולסים של 1800 סיבובים לדקה. שני אורות כחולים דולקים לציון הילוך שני. מהירות פולסים: 2400 סיבובים לדקה. שלושה אורות כחולים דולקים לציון הילוך שלישי. מהירות פולסים: 3200 סיבובים לדקה.

								
כדור קטן	ספירלי	צורת U	כדור גדול	מגדל	ראש שטוח	מקור ברווז	ראש כדורי עגול	ראש חרוטי
לשרירים קטנים	למפרקים	לעמוד השדרה	לשרירים גדולים	לכל הגוף	לכל הגוף	לעמוד השדרה	לכל הגוף	למפרקים

הפעלה :

- יש להתקין סוללה (3) במכשיר העיסוי. שימו לב לכיוון מכסה הסוללות (2). לחצו פנימה לסיום.
- סובבו את מתג ההפעלה (6) למצב מופעל כדי שאורות ציון עוצמת הסוללה (9) יידלקו. ארבעה אורות ירוקים ואחד אדום יאירו כדי להראות את עוצמת הסוללה. אם רק האור האדום דולק, יש לטעון את הסוללות.
- בהתבסס על האזור שברצונכם לעסות, בחרו בראש עיסוי והתקינו בחור העגול של המכשיר. לחצו על לחצן ההפעלה (4). המנוע יופעל, והאור הכחול מעל המנוע יציין כי המכשיר פועל במהירות הנמוכה ביותר. לחצו על לחצן ההפעלה שוב כדי לעבור למהירות הבאה. לחצו בפעם השלישית כדי לעבור להילוך השלישי. לחצו בפעם הרביעית לכיבוי המכשיר. לחצו בפעם החמישית על לחצן ההפעלה כדי להפעיל שוב את המכשיר במהירות הנמוכה, וכן הלאה.
- אחרי העיסוי, כבו את המכשיר. אם יש צורך להוציא את הסוללות, לחצו על לחצן הוצאת הסוללות (2) ומשכו אותן החוצה.

שימוש בסוללה :

- אחרי שהסוללה מתרוקנת, יש לטעון אותה 2.5-3 שעות לערך עד שתתמלא. סוללה מלאה יכולה להפעיל את המכשיר למשך ארבע שעות רצופות בערך. בזמן טעינת הסוללה, סימן טעינה (5) יאיר כדי להראות שהמכשיר נטען. למען בטיחותכם, אין להפעיל את המכשיר בזמן שהוא נטען, וחל איסור על שימוש במכשיר בזמן הטעינה.
- התמונות להלן מראות את השיטה הנכונה להתקנת הסוללה. בזמן התקנתה, וודאו שהסוללה הוכנסה בכיוון הנכון ובהתאם ללחצן הוצאת הסוללה, ולחצו את המכסה לסיום. בזמן הוצאת הסוללה, לחצו על לחצן הוצאת הסוללה והוציאו אותה.



הוראות בטיחות:

3. להפחתת סכנת התחשמלות, דליקה ופציעה גופנית, יש להשתמש במוצר בהתאם להנחיות הבאות:
 1. המוצר מיועד לשימוש על ידי מבוגרים בלבד.
 2. למניעת פציעה, אין לאפשר למכשיר לעסות ישירות את העור. על אזור העיסוי להיות מכוסה בבגד נקי ויבש, או במגבת יבשה ונקייה. יש ללחוץ את המכשיר כנגד הבגד ולהזיזו בעדינות. אין לעסות את אותו אזור למשך יותר מ-60 שניות רצופות.
 3. ניתן להשתמש במהירות ובלחץ גבוהים רק על רקמות רקות של הגוף, כל עוד לא נגרם כאב או אי נחת. אין להשתמש במהירות ובלחץ גבוהים על אזור הראש או על אזורים נוקשים (עם עצמות) כלשהם של הגוף.
 4. יש לבחור בראש עיסוי מתאים, בהתאם לדרישות העיסוי השונות.
 5. שימוש תדיר במכשיר במהירות ובלחץ גבוהים על אותו מקום עלול לגרום לשפופים, כאב ואי נחת. יש להפסיק את השימוש במכשיר במקרה זה.
 6. יש להרחיק אצבעות, שיער או חלקי כלשהם של הגוף מהמוט המאריך של המכשיר ומאזור הוצאת החום שבחלק האחורי של המנוע, כדי למנוע פציעות.
 7. אין למקם חפצים כלשהם על גבי אזור הוצאת החום של המנוע.
 8. אין לטבול את המכשיר במים. אין לאפשר למים להיכנס למכשיר דרך אזור הוצאת החום של המנוע.
 9. אין להשליך מכשיר זה ויש לטפל בו בעדינות.
 10. יש לטעון רק עם המטען שהגיע עם המכשיר.
 11. יש לבדוק את המכשיר והסוללות לפני כל שימוש בו.
 12. אין לבצע שינויים כלשהם במכשיר.
 13. אין להפעיל את המכשיר ולטעון אותו ללא השגחה.
- תחזוקה:
1. יש לנגב את פני שטח המכשיר במטלית מעט לחה ולייבשו במטלית רכה.
 2. בזמן אחסון המכשיר לפרק זמן ארוך או אריזתו לנסיעות, יש להפריד את הסוללות מהמכשיר ולמקם אותו באריזה המקורית.
- אזהרה:

1. אין להיכנס עם המכשיר למים. יש להרחיק את המכשיר מנוזלים וממקורות חום. יש להקפיד שפתח הוצאת החום של המנוע נקי ולא חסום.
2. אין לפתוח את ברגי המכשיר בכוחות עצמכם.
3. יש לכבות את המכשיר לאחר שעה של שימוש, ולתת לו לנוח כחצי שעה לפני שימוש נוסף בו.
4. יש להפריד את המטען מהסוללות לאחר הטעינה או לפני השימוש במכשיר. אין להשתמש במכשיר בזמן טעינתו.
5. אין להשתמש במכשיר זה על איברים פצועים ללא היוועצות מקדימה ברופא.

הצהרת אי אחריות:

לפני השימוש במכשיר, יש לקרוא את ההוראות בקפידה. יש להשתמש במכשיר רק בהתאם להנחיות. אין ליצרן או לאנגריים ספורט אחריות משפטית במקרה שנעשה במכשיר שימוש שלא בהתאם להנחיות והוראות השימוש.

אין להשתמש במהירות ובלחץ גבוהים ואין להשתמש במכשיר ללא אישור רפואי אם:
את בהריון. אנשים חולי סכרת וסיבוכים שלה כגון ניורופתיה או נזק לרשתית, אם יש לך קוצב לב, אם עברת ניתוח לאחרונה, או אם אתה סובל מאפילפסיה או ממיגרנה, פריצת דיסק, דלקת בחוליות, אם הוחלף לך מפרק לאחרונה או שיש לך התקן תוך רחמי, או אם אתם סובלים מבעיות בריאות. מבוגרים שבראותם לקויה וילדים צריכים להיזהר בזמן השימוש במכשיר, ולעשות זאת תוך ליווי מבוגר בריא. אולם, מגבלות אלו אינן מונעות בהכרח את השימוש במכשיר. אנו ממליצים על התייעצות עם רופא ועל שימוש במכשיר רק אם קיבלתם את אישורו. אנו לומדים את ההשפעות של המכשיר על בעיות רפואיות שונות, כך שהמגבלות לעיל אולי אינן מקיפות דיין. לכן יש להיוועץ גם עם אדם ממקצועות הרפואה או עם פיזיותרפיסט.

אחריות:

המשווק ייתקן או יחליף חלקים פגומים עקב פגמים בחומרים או בהליך העיצוב עד שנה לאחר הרכישה. זאת להוציא המקרים הבאים:

1. נזק שנגרם למכשיר עקב הפעלה לא נכונה או הובלה לא נכונה.
2. פירוק ותיקון ללא הרשאה של המכשיר.
3. אי ביצוע פעולות רגילות בהתאם להוראות השימוש.
4. עומס יתר מעבר ליכולת המוצהרת של מכשיר זה.
5. המוצר ניזוק בשל תנאי אחסון לא טובים או סביבת תחזוקה ירודה במיוחד.
6. נזק כתוצאה מנפילה או שבר.
7. אם לא תוכלו לספק הוכחה לגבי תאריך הרכישה.

PHOENIX

מבית אנרג'ים ספורט

Energym Sport